

2011年11月15日

財団法人 骨髄移植推進財団
非血縁者間骨髄移植・採取認定施設
移植認定診療科連絡責任医師 各位
採取認定施設採取責任医師 各位
一般社団法人 日本造血細胞移植学会
会員 各位

財団法人 骨髄移植推進財団
一般社団法人 日本造血細胞移植学会

骨髄液バッグに輸血セットのコネクター針を接続する際に起きた
バッグの破損と改良品について（続報）
（フェンオール社製 ボーンマロウコレクションキット）

（財）骨髄移植推進財団から8月26日付け通知「骨髄液バッグに輸血セットのコネクター針を接続する際に起きたバッグの破損について（続報）」で情報提供し、併せてアンケート（「骨髄液バッグに関する現状調査のお願い」）を実施いたしました。お忙しい中、ご返信いただきまして誠にありがとうございました。

さて、この度、販売元である株式会社パルメディカルより、フェンオール社製ボーンマロウコレクションキットの改良品が11月下旬～12月上旬頃に国内販売が開始される予定である旨、報告がありました。

※改良箇所は別添カラー資料をご確認ください。

※当該カラー資料は、改良品のキットに同封されるそうです。

つきましては、アンケート結果のご報告および株式会社パルメディカルが作成した別添カラー資料をお送りいたしますので、ご確認のほどお願いいたします。

なお、骨髄移植推進財団 医療員会では、**当該骨髄バッグの使用禁止はできないが、改良前のバッグに付属するトランスファーバッグの使用は推奨しない**、との見解が出されましたことを申し添えます。

記

- 参考資料：フェンオール社製ボーンマロウコレクションキットの改良点について（財団作成）
- 別添カラー資料：【お願い】輸血セットの選定にあたって（株式会社パルメディカル作成）
- 「骨髄採取キット/搬送バッグに関する現状調査のお願い」アンケート集計結果（財団作成）

以上

<問い合わせ先>


財団法人骨髄移植推進財団 移植調整部

TEL 03-5280-4771 FAX 03-5280-3856

裏面もご確認ください。

フェンオール社製ボーンマロウコレクションキットの改良点について


今回、骨髓バッグの接続ポートのチューブ部分を従来品より約 5 mm長くなります。(下記参照)

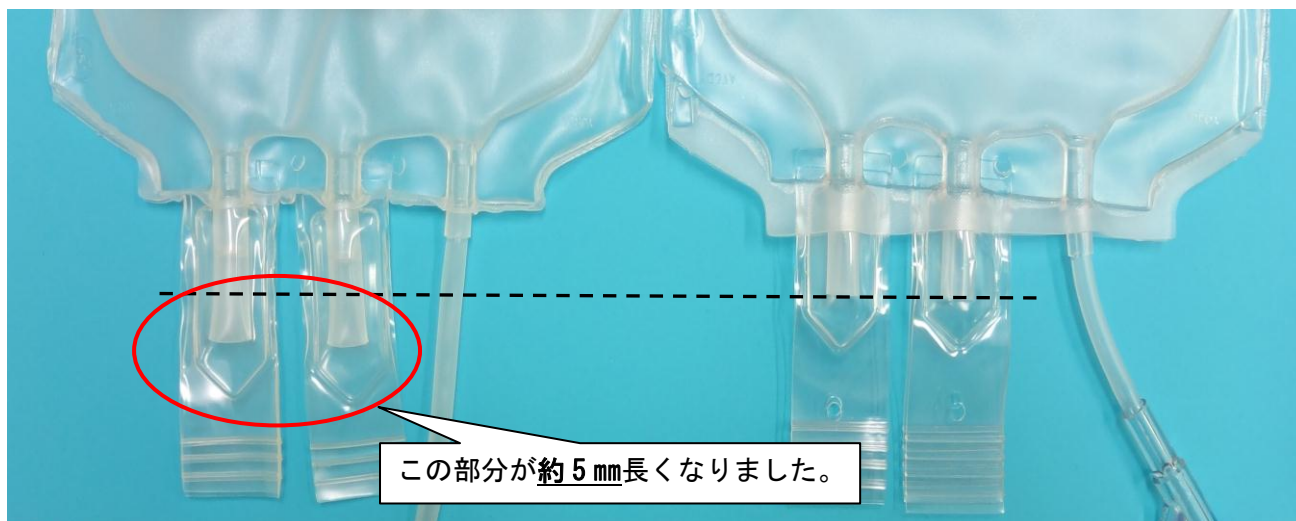

(改良品)

(従来品)

<接続ポート部分 拡大図>

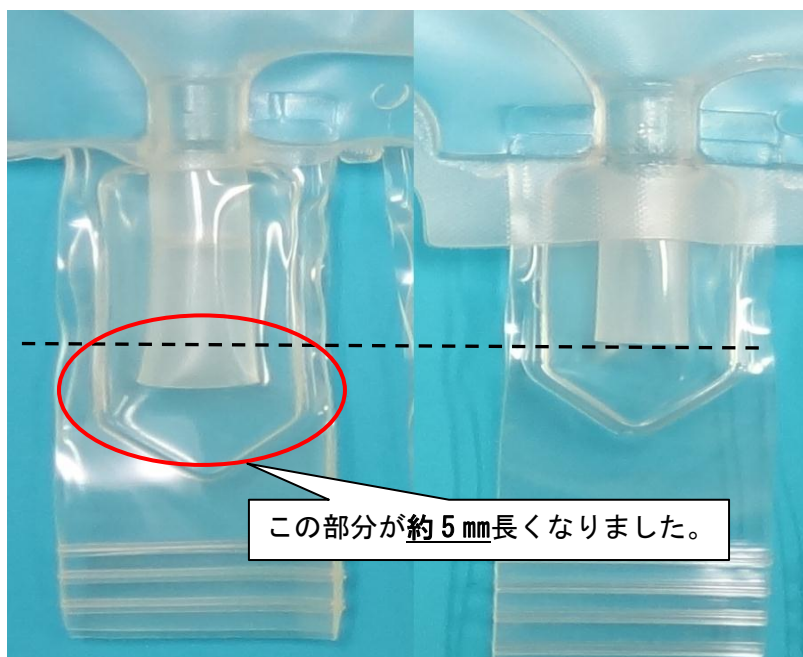

(改良品)

(従来品)